


# Alarmtaste ohne Sprache

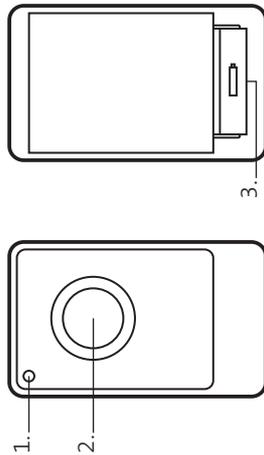

1. LED-Anzeige
2. Alarmknopf
3. Batteriefach

## Inbetriebnahme

**Schritt 1:** Öffnen Sie die Alarmtaste mit einem Kreuzschraubenzieher und setzen Sie die beigelegte Batterie ein.

**Schritt 2:** Drücken Sie am Notrufgerät die gelb umrandete Taste für ca. 3 Sekunden, bis diese blinkt.

**Schritt 3:** Drücken Sie an der Alarmtaste den Alarmknopf, bis das Notrufgerät einen Bestätigungston abgibt.

**Schritt 4:** Drücken Sie nochmals kurz die gelb umrandete Taste, bis sie nicht mehr blinkt. Die Alarmtaste ist nun mit dem Notrufgerät verbunden.

## Reichweite testen

Machen Sie vor der fixen Montage der Alarmtaste vom gewünschten Standort aus einen Probealarm, um die Reichweite zu testen. Diese beträgt ca. 150 Meter zum Notrufgerät.

Drücken Sie dazu für ca. 2 Sekunden den Alarmknopf, bis die LED-Anzeige rot aufleuchtet.

**Tipp:** Dabei wird ein richtiger Alarm ausgelöst. Informieren Sie idealerweise Ihre Kontakte im Vorfeld über den Probealarm.

## Installation

**Schritt 1:** Entfernen Sie die hintere Abdeckung der Alarmtaste.

**Schritt 2:** Drücken Sie die beiden Vertiefungen ein, die sich auf der Rückseite der Abdeckung befinden.

**Schritt 3:** Nutzen Sie die Löcher, um die hintere Abdeckung der Alarmtaste an die Wand zu montieren. Setzen Sie dazu zunächst die Dübel in die Wand. Schrauben Sie danach die Abdeckung in die Dübel.

**Schritt 4:** Setzen Sie die Front der Alarmtaste auf die bereits an der Wand befestigten Rückseite der Alarmtaste.

## In Betrieb

Wenn Sie den Alarmknopf für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, leuchtet die LED-Anzeige rot auf und ein Alarm wird ausgelöst. Dieser kann nicht mehr gestoppt werden.

Sobald die Batterie der Alarmtaste leer ist, löst das Notrufgerät einen technischen Alarm aus. Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 5 Jahre.

## Hinweis

Die Alarmtaste ist spritzwasserfest.

## Im Fall der Fälle bereit

Testen Sie Ihre Alarmtaste ohne Sprache auch nach der Inbetriebnahme regelmässig. So reagieren Sie im Ernstfall automatisch richtig.

Swisscom (Schweiz) AG  
Postfach  
3050 Bern

[www.swisscom.com/notruf](http://www.swisscom.com/notruf)